



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



Інноваційний Інгаллятор ArhiMED MESH PRO

• Тихий • Портативний • Компактний

*Ефективний з будь-яким розчином



Безконтактний термометр ArhiMED ST 300

Дякуємо Вам за довіру та вітаємо з покупкою!
Придбавши інфрачервоний термометр від ArhiMED,
Ви стали власником високоякісного продукту. Для досягнення бажаного
успіху і забезпечення тривалого строку дії інфрачервоного термометра,
ми радимо уважно прочитати інструкцію.

Зміст

1. Правила використання.....	1
2. Комплектація та упаковка.....	3
3. Вимірювання температури тіла.....	4
4. Вказівки щодо застосування.....	5
5. Чистка та догляд.....	6
6. Умови гарантії.....	7
7. Технічні характеристики.....	8
9. Використання термометра.....	10

1. Правила використання

- Використовуйте прилад тільки за його призначенням, вказаним в інструкції по застосуванню. При використанні не за призначенням, гарантія втрачає свою силу.
- Використання термометра не заміняє консультації у лікаря.
- Перед проведенням виміру температури пацієнт та термометр повинні, протягом як мінімум 30 хвилин, перебувати в постійному середовищі.
- Даний прилад не призначений для використання особами (в т. ч. дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з браком досвіду і / або знань за винятком випадків, коли вони знаходяться під постійним наглядом відповідальних за них осіб або отримали від них вказівки, по використанню.
- За дітьми потрібно постійно стежити, щоб не допустити їхньої гри з приладом.

Правила використання

Температура у лобовій і скроневій областях відрізняється від температури всередині тіла, яка вимірюється, наприклад, орально або ректально. Захворювання, що супроводжується високою температурою, на ранній стадії може призвести до судинозвужуючого ефекту (вазоконстрикції), це робить шкіру холодною. В такому випадку температура, виміряна за допомогою термометра може бути дуже низькою. Якщо внаслідок цього результат вимірювання температури не відповідає самопочуттю пацієнта або температура виявиться занадто низькою, повторюйте вимір кожні 15 хвилин. Для перевірки Ви також можете виміряти температуру всередині тіла за допомогою звичайного термометра, який підходить для орального або ректального вимірювання.

- Контрольне вимірювання за допомогою звичайного медичного термометра рекомендується в наступних випадках:
 - Результат вимірювання занадто низький.
 - У новонароджених перші 100 днів.
 - У дітей молодше трьох років з ослабленою імунною системою або якщо при високій або -нормальній температурі тіла дитина поводить себе дивно.
 - Якщо користувач застосує пристрій вперше або не знайомий з правилами застосування пристрою.
- В разі несправностей або пошкоджень не ремонтуйте прилад самостійно, тому що при цьому гарантія втрачає свою силу. Звертайтеся в організації торгівлі і довіряйте проведення ремонту лише авторизованим сервісним центрам.
- Забороняється використовувати пошкоджений пристрій.
- Не відкривати пристрій. Термометр містить малі деталі, які діти можуть проковтнути.
- Не використовуйте термометр при підвищеній вологості.
- Не кладіть термометр в воду або в інші рідини. Він не водонепроникний.
- Для очищення дотримуйтеся вказівок, з розділу "Чищення та догляд".
- Не стукайте по термометру. Не допускайте його падіння.
- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, вкрай високих або низьких температур, забруднення і пилу.
- Якщо Ви маєте намір на тривалий час припинити використання приладу, видаліть з нього елементи живлення.

2. Комплектація та упаковка

- Перевірте комплектність приладу і відсутність пошкоджень. У разі сумнівів зверніться до свого дилера.

До комплекту входять:

- Термометр інфрачервоний безконтактний ArhiMED EcoTherm ST 300
- 2 батарейки (типу AAA, R6) 1.5B
- Інструкція з використання.

Упаковка може бути вторично використана чи перероблена !

Важлива інформація про вимірювання температури за допомогою інфрачервоного термометра

Що таке підвищена температура тіла? Наша нормальна температура тіла знаходиться в діапазоні від 36 ° C до 37,5 ° C. В залежності від часу доби і фізичного стану (наприклад, коли у дітей ріжуться зуби), певні коливання є нормальними. Якщо температура тіла перевищує 38 ° C, то говорять про підвищену температуру. Підвищена температура часто з'являється при інфекційних захворюваннях і є ознакою інтенсивної роботи захисної імунної системи організму. Цю природно реакцію організму на зовнішні збудники хвороб рекомендується регулярно контролювати. Якщо температура більше 39 °C та не спадає навіть після 1-2 днів, потрібно обов'язково звернутися до лікаря.

Вимірювання температури тіла - точно та швидко!

Інфрачервоний термометр від ArhiMED гарантує точне безконтактне вимірювання (відстань приблизно 2-3 см) температури тіла. Вимірювання виконуються на внутрішньому вигині ліктя, скроні та зоні шиї. Вимірюється значення випроміненої звітної енергії, після чого воно переводиться в температурний показник. Результат виміру відображається на дисплеї за 1 секунду.

Додаткова функція:

Окрім виміру температури тіла інфрачервоний термометр може застосовуватися для виміру температури різних об'єктів (наприклад температури води в ванночці для купання, температури дитячого харчування, їжі або повітря в кімнаті).



Тіло



Рідина



Предмет

3. Вимірювання температури тіла

ВКАЗІВКИ, як отримати точні результати виміру:

Перед проведенням виміру температури пацієнт та термометр повинні мінімум 30 хвилин перебувати в одному середовищі.

- Не вимірюйте під час або відразу після годування дитини.
- Не використовуйте термометр при підвищеній вологості.
- Пацієнту забороняється пити, їсти безпосередньо перед вимірюванням або під час вимірювання температури, а також слід уникати надмірних фізичних зусиль.
- Очистіть ділянку, на якій буде проводитися вимір, видаліть пил, волосся та піт.
- Не виводьте термометр з області вимірювання, поки не почуєте сигнал, що підтверджує кінець процедури.
- Якщо під час або після виміру датчик забруднився, очистіть його за допомогою ватного тампона, змоченого в медичному спирті, перед тим, як приборати термометр.
- Завжди слід вимірювати температуру на одному і тому ж місці, так як в різних умовах результат вимірювання може змінюватися.

4. Вказівки щодо застосування

Вимірювання проводяться в наступних місцях



Вказівки щодо застосування

Для вимірювання температури тіла необхідно обрати режим "тіло", а для виміру температури інших поверхонь - "об'єкт" (На екрані відображається Surface Temp). Готові значення з'являються на екрані за 0,5 сек. Термометр запам'ятовує 32 вимірювання. Їх можливо продивитися, натискаючи на кнопки + та -.



Тіло/Об'єкт

Пам'ять вимірів

5. Чистка та догляд

- Датчик є найбільш чутливою частиною інфрачервоного термометра. Уникайте його забруднення або пошкодження.
- Не занурюйте термометр у воду або інші рідини. Він не водонепроникний. Для очищення термометра використовуйте м'який матеріал, злегка змочений 70%-вим ізопропіловим спиртом.
- Не допускайте попадання води в середину приладу. Використовуйте прилад тільки після його повного висихання.
- Не використовуйте агресивні чистячі засоби, розчинники, бензин або жорсткі щітки.
- Слідкуйте за тим, щоб не подряпати датчик, дисплей і корпус. Не зберігайте термометр і не користуйтеся ним при дуже високій або занадто низькій температурі і вологості повітря, під прямими сонячними променями, в поєднанні з електричним струмом або в запиленому місці.
- Виймайте батарейки з приладу, якщо він не використовується тривалий час. В іншому випадку загрожує небезпека витікання електроліту з батарейки. Якщо термометром користуватися відповідно до даної інструкції, то регулярного обслуговування або калібрування не потрібно.

Вказівки щодо утилізації

- Забороняється утилізувати даний пристрій разом із побутовими відходами. Кожен споживач зобов'язаний здавати всі електричні прилади незалежно від того, чи містять вони шкідливі речовини, в місці приймальні пункти або підприємства торгівлі, щоб забезпечити їх екологічну утилізацію.
- Вийміть батарейки перед утилізацією приладу.
- Не викидайте використані батарейки разом з побутовими відходами, а здавайте їх як спеціальні відходи або в пункти прийому батарейок на підприємствах спеціалізованої торгівлі!
- З питань утилізації звертайтеся до комунальних служб або до дилера.

6. Умови гарантії

- 1. Ця гарантія дійсна тільки при правильному і чіткому заповненні гарантійного талону із зазначенням, дати продажу, чіткими печатками фірми-продавця.Фірма залишає за собою право відмови в гарантійному ремонті, якщо гарантійний талон не наданий або інформація в ньому неповна, нерозбірлива або містить виправлення.
- 2. Гарантія включає виконання ремонтних робіт та заміну дефектних частин та не розповсюджується на деталі оздоблення, елементи живлення та інші деталі, що мають обмежений термін використання.
- 3. Доставка виробів в сервісний центр та навпаки здійснюється за рахунок покупця.
- 4. Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню, якщо виявлені:
 - механічні пошкодження
 - сліди стороннього втручання
 - сліди попадання рідини в пристрій
 - збиток, заподіяний споживачем в результаті недотримання правил експлуатації
 - збиток в результаті попадання всередину сторонніх предметів, рідин або комах
 - сліди ремонту в неавторизованих сервісних центрах, та в домашніх умовах
 - сліди внесення змін до конструкції приладу.
- 5. Гарантія розповсюджується тільки на оригінальні прилади придбані на території України.

Що повинно бути в посилці ?

- Пристрій (його повна комплектність)
- Копія чеку (бажано)
- Гарантійний талон.

Умови гарантії та ремонту

Гарантійний термін на ArhiMED EcoTherm ST 350 становить три роки. У гарантійному випадку дата купівлі підтверджується касовим чеком або рахунком. При покупці переконайтеся, що гарантійний талон заповнений правильно. Зберігайте його разом з чеком купівлі протягом гарантійного терміну. При виявленні виробничих дефектів покупцеві гарантується безкоштовний ремонт або заміна деталей що вийшли з ладу.

7. Технічні характеристики

~Діапазон вимірювання:

• Температура тіла режим: 32-42.5 ° C

• Температура об'єкту режим: 0-100 °

~Точність виміру:

• 0-31.9 °C: ± 2.0 °C

• 32.0-35 °C: ± 0.3 °C

• 35.1-39.0 °C: ± 0.1 °C

• 39.1-42.9 °C: ± 0.3 °C

• 43.0-100 °C: ± 2.0 °C

➤ Час виміру.....0,5 сек.

➤ Температура застосування.....10 ~ 40°C

➤ Живлення.....2x AAA 1.5В батарейки

➤ Автомідключеннячерез 20 секунд.

➤ Відстань вимірювання.....2-8 см

➤ Точність індикації.....0,1 °C

➤ Пам'ять останніх вимірів.....32+

➤ РК-дисплей

➤ Автоматичне вимкнення< 20 секунд

➤ Гарантія.....2 роки

8. Використання термометра

Вимірювання температури. Натисніть курок вимірювання — екран засвітиться та відобразить «---», що означає готовність до роботи. Наведіть пристрій на лоб на відстані 3~5 см, потім знову натисніть курок вимірювання. Результат вимірювання з'явиться на екрані.

Перемикання режиму вимірювання. Коли екран увімкнений, коротко натисніть кнопку «тіло/об'єкт», щоб перемикати два режими: режим тіла та режим об'єкта.


Примітка: Для вимірювання об'єкта натисніть кнопку «Тіло/Об'єкт», щоб перемкнутися в режим об'єкта. Наведіть пристрій на поверхню об'єкта (3~5 см), потім натисніть курок вимірювання для отримання результату.

Увімкнення та вимкнення живлення. Коли пристрій вимкнений, натисніть курок вимірювання, щоб увімкнути його. Якщо пристрій увімкнений і не використовується приблизно 20 секунд, він автоматично вимкнеться. Також можна натиснути й утримувати курок вимірювання близько 2 секунд, щоб примусово вимкнути пристрій.

Індикація низької та високої температури

Коли виміряна температура ≥32°C та <37,5°C, на дисплеї з'являється зелена підсвітка. Коли виміряна температура ≥37,5°C та <38°C, на дисплеї з'являється помаранчева підсвітка. Коли виміряна температура ≥38°C, на дисплеї з'являється червона підсвітка.

1. Тіло/Об'єкт
2. Режим тіла
3. дисплей
4. виміряна температура в межах (32,0°C ~ 37,5°C)
5. Виміряна температура поза нормальним діапазоном)
6. Індикатор батареї
7. Шкала температури °C (Цельсій) / °F (Фаренгейт)
8. Порядковий номер вимірювання

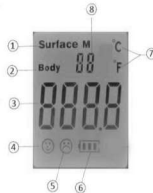

Перегляд пам'яті. Після вимірювання натисніть клавіші «+» та «-», щоб увійти в режим перегляду пам'яті. Для перегляду записів пам'яті натискайте «+» або «-», щоб рухатися вгору або вниз списком. Натисніть курок вимірювання, щоб повернутися до першого запису.

Примітка: Останній вимір відображається першим. Якщо пам'ять заповнена, нові результати перезаписують найстаріші.

Налаштування функцій. Коротко натисніть кнопку «тіло/об'єкт», щоб увійти в налаштування функцій. Натисніть клавішу «+» або «-» для вибору потрібного параметра, потім знову натисніть «тіло/об'єкт» для підтвердження. Натисніть курок вимірювання, щоб повернутися на першу сторінку. Наприклад, можна змінити одиниці вимірювання температури (°C або °F).

Індикація	Можливі причини	Спробуйте це рішення
	(1) Низький заряд батарей. (2) Температура вимірювання перевищує встановлений діапазон. Для режиму «тіло» це понад 43,0°C, для режиму «об'єкт» - понад 100°C.	Упевніться, що умови вимірювання в приміщенні стабільні (без різких перепадів температури, протягів тощо).
	Температура вимірювання нижча за встановлений діапазон. Для режиму «тіло» це нижче 32,0°C, для режиму «об'єкт» - нижче 0°C.	Перевірте, чи відстань між термометром та поверхню, яку вимірюють, становить 3-5 см.
	Сталася внутрішня помилка датчика.	Зверніться до сервісного центру ArhiMED
	Температура навколишнього середовища перевищує 35°C. (Прилад перебуває в занадто теплому місці)	Розмістіть прилад у нормальній температурній умові (температура в діапазоні 16°C-35°C) і зачекайте 30 хвилин.
	Температура навколишнього середовища нижча за 16°C	Розмістіть прилад у нормальній температурній умові (температура в діапазоні 16°C-35°C) і зачекайте 30 хвилин.
No display	Неправильно встановлені батареї або їх відсутність.	Перевірте полярність батарей (+ та -) Переконайтеся, що вони вставлені правильно, або замініть на нові.

PHOTO EPILATOR
ФОТОЕПІЛЯТОР

➤ Безболісна епіляція

*будь якої зони тіла

➤ Фотонове омолодження шкіри

➤ Зупиняє ріст волосся

ARHIMED
IPL PRO



Якщо в тебе є будь-які питання по роботі приладу, або раптом щось не виходить - скоріше телефонуй

або пиши нам у



Viber



Telegram

+38 (073)853 38 51

Підтримка, Сервіс, Гарантія